



Medische
technologie

**Moeiteloos en standalone
meten van X-ray**

RaySafe X2



De RaySafe X2 is de perfecte
combinatie van
gebruiksgemak en
ongeevenaarde precisie.



Medische
technologie

De RaySafe X2 is een meter voor straling die uitblinkt in eenvoud en nauwkeurigheid. Het toestel meet door middel van solid state sensoren.

Sluit de gewenste sensor aan op de X2 base unit, plaatst de sensor en de rest doet de X2 allemaal. Je kunt een R/F-, MAM-, CT-, Survey-, Volt- of Light sensor aansluiten.

De X2 base unit herkent direct het type sensor, importeert bijbehorende kalibratiegegevens en toont de relevante parameters op het scherm. De X2 triggert wanneer de sensor met straling in contact komt. De meetresultaten worden in één overzicht weergegeven, zowel numeriek als grafisch. Vervolgens kun je inzoomen op één specifieke parameter.


Alle metingen die uitgevoerd worden met de X2, worden opgeslagen en kun je terugkijken. Met de X2-viewer software kunnen de metingen uitgelezen en geëxporteerd worden naar Excel.

Optioneel kun je de X2 inzetten voor invasieve mAs en mA metingen.

Kijk op de website van RaySafe voor actuele Excel templates om metingen uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld een CTDI meting.

Belangrijke eigenschappen RaySafe X2

- Nauwkeurig en eenvoudig in gebruik
- Kalibratie van sensoren, met behulp van serviceprogramma
- R/F-, MAM-, CT-, Survey-, Volt- en Light sensor beschikbaar
- Beschikt over een standaard met houder voor sensoren
- X2-viewer software voor analyse en verwerking van metingen
- Meet op basis van IEC 61674

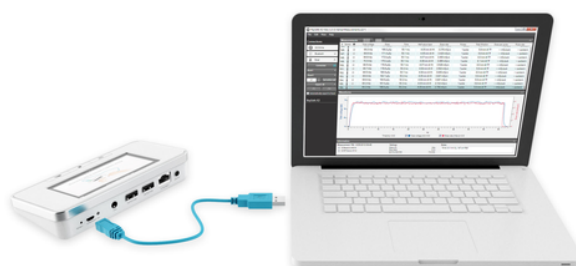

AdQuipment
MEDICAL

Chr. Huygensweg 25 • 3225 LD Hellevoetsluis
The Netherlands • T +31 (0)181 301 300
info@adquipment.nl • www.adquipment.nl



Meer weten over de RaySafe X2
en bijbehorende sensoren?
Scan de QR code en maak een
afspraak met onze
ervaringsdeskundige!